

UMG-Labor



Hinweise für Laboruntersuchungen

Klinik für Hämatologie und Medizinische Onkologie (Prof. Dr. G. Wulf ^(komm)) - Institut für Klinische Chemie (Prof. Dr. med. A. Fischer) - Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie (Prof. Dr. U. Groß) - Klinik für Nephrologie und Rheumatologie (Prof. Dr. M. Zeisberg) - Zentralabteilung Transfusionsmedizin (PD Dr. J. Riggert)

Allgemeine Hinweise

Sie finden diese Informationen in regelmäßig aktualisierter Form auf unserer Homepage.

<https://labor.umg.eu/> oder <https://clinchem.umg.eu/>

		Telefon	Pieper
Befundnachfrage		+49 (0) 551 39-62515, -62516	
Notfalllabor		-68567, -14635	
Diensthabender wiss. Assistent			919-1219
Ärztliche Leitung	Prof. Dr. med. A. Fischer	-63073	
Sekretariat	C. Kokudje S. Jordan	-68734 -63067	
Oberärztin	Prof. Dr. med. J. Schanz	-65754	919-1378
Funktionsoberarzt	PD. Dr. Dr. med. M. Schnelle	-65510	919-6609
Ärztliche MitarbeiterInnen	Dr. med. A. Eidizadeh	-65753	919-1378
Wiss. Mitarbeiter	Prof. Dr. rer. nat. A. R. Asif Dr. rer. nat. G. H. Dihazi Dr. rer. nat. S. Dierks A. Hafke, PhD T. Khromov, PhD Dr. rer. nat. F. Streit Dr. phil. nat. B. Zechmeister	-22945 -66379 -65698 -63832 -63340 -65675 -65688	919-1232 919-1220 919-6592 919-6108 919-1226 919-1987
Ltd. MTA	A. Otte	-65542	919-1221

Das nach DIN EN ISO:15189:2014 und 17025:2018 akkreditierte UMG-Labor steht den Stationen, Ambulanzen und externen Einsendern täglich 24 Stunden 365 Tage im Jahr zur Verfügung:

Routineanalytik (Montag bis Freitag 8:00 - 15:00 Uhr): Klinische Chemie, Hämatologie, Hämostaseologie, Spezialanalytik, Tumormarker, Virologie, Molekulare Diagnostik, Endokrinologie, Nephrologie-Rheumatologie und Drug Monitoring

Notfälle (Montag bis Sonntag, 24 Stunden täglich): Klinische Chemie, kleines Blutbild, Globalgerinnung, Drug Monitoring und Urin-Status. Notfallbefunde stehen üblicherweise binnen 30 min nach Eintreffen der Proben im UMG-Labor zur Verfügung (Ausnahme: Immunoassays).

Eilanalytik (Montag bis Sonntag, 24 Stunden täglich): Erweitertes Spektrum der Klinischen Chemie, kleines Blutbild, Globalgerinnung. Ergebnisrückführung für die Eilanalytik in der Regel unter zwei Stunden nach Eintreffen der Proben im UMG-Labor. Bei kritischen und unplausiblen Laborwerten wird umgehend der Einsender zusätzlich telefonisch informiert. Informationen zu der Messunsicherheit der einzelnen Methoden sowie zu dem Qualitätsmanagement sind im Labor erhältlich.

Die Analysen werden in Ixserv elektronisch angefordert (Order-Entry). Probenannahme UMG-Labor: Raum 3.E1 220 (gegenüber Aufzug E2 im 3. Stock). Rohrpoststation 4, Teleafift 134 Routine, Teleafift 136 Not- und Eilfälle.

Beleg 1	Eil / Routine für Klinische Chemie, Blutbild und Gerinnung	Beleg 7	Diabetes und Insulinsekretionsstörungen
Beleg 2	Spezialanalytik, Proteinelektrophorese, Molekulare Diagnostik	Beleg 9	Extravasale Flüssigkeiten Eil / Routine
Beleg 3	Notfallanalytik	Beleg 10	Spezielle Hämatologie-Onkologie, Zytogenetik
Beleg 4	Drug Monitoring Eil / Routine	Beleg 11	Endokrinologie, Hormone
Beleg 5	Tumormarker	Beleg 12	Nephrologie-Rheumatologie
Beleg 6	Urinanalytik	Beleg 14	Virusdiagnostik
		Beleg	Seltene zusätzliche Analysen

Zur Blutentnahme sind die im Anhang dargestellten Sarstedt-Monovetten zu verwenden.

Bei IT-Ausfällen ist der Papierbeleg 3 "Notfallanalytik" einzusetzen. (Bestellung bei der Laborauskunft, Tel. -62515, -62516)

Die Referenzbereiche beziehen sich auf Erwachsene. Die altersabhängigen Referenzbereiche entfallen hier aus Platzgründen. Sie werden jedoch im Befundausdruck zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen

Ab	Abstrich	KO	Körperoberfläche	PrM	Prämenopause
AUC	Area under the curve	L	Liquor	RW	Richtwerte
B	Blut	LP	Lutealphase	S	Serum
C	Kapillarblut	max	Spitzenspiegel, nach Medikamenteneinnahme	SFP	Späte Follikelphase
E	Erythrozyten	min	Talspiegel, am Ende des Dosierungsintervalls	Sp	Speichel
eGFR	Estimated glomerular filtration rate	OP	Ovarialphase	Sy	Synovia
EG	Entscheidungsgrenze	P	Plasma	TB	Therapeutischer Bereich
FEU	Fibrinogen Äquivalent Units	PM	Postmenopause	U	Urin
FP	Follikelphase			*	Parameter bzw. Bereich noch nicht akkreditiert
FFP	Frühe Follikelphase				

Referenzintervalle für Erwachsene

Alters- und geschlechtsabhängige Referenzintervalle, soweit vorhanden, werden nur im Befundausdruck dargestellt

1. BLUT

1.1. Gerinnung

P-TPZ (Quick)		80 - 130	%
P-aPTT		25 - 37	sec
P-Thrombinzeit (TZ)		10.3 - 16.6	sec
P-Fibrinogen (nach Clauss)		200 - 393	mg/dl
P-Antithrombin		83 - 128	%
P-D-Dimere		< 0.50	mg/l FEU
P-TPZ (INR)			
Thromboembolisches Risiko		2.0 - 3.0 ^{TB)}	
Prothetischer Herzklappenersatz		2.0 - 3.5 ^{TB)}	
	^{TB)} Therapeutischer Bereich unter Marcumar		
P-Faktor II		79 - 131	%
P-Faktor V		62 - 139	%
P-Faktor VII		50 - 129	%
P-Faktor VIII:C		70 - 170	%
P-Faktor IX		65 - 150	%
P-Faktor X		77 - 131	%
P-Faktor XI		65 - 150	%
P-Faktor XII		50 - 150	%
P-Faktor XIII		63 - 157	%
P-freies Protein S	m	74 - 146	%
	w	55 - 123.7	%
P-Fibrinogen (immunologisch)		180 - 350	%
P-Protein C		70 - 140	%
P-von-Willebrand-Faktor-Antigen	Blutgruppe A, B, AB	66 - 176	%
	Blutgruppe O	42 - 141	%
P-Ristocetin-Cofaktor quantitativ	Blutgruppe A, B, AB	61 - 240	%
	Blutgruppe O	48 - 202	%

Erweitertes Untersuchungsspektrum

P-Anti-Cardiolipin-AK
P-Anti-IIa-Aktivität unter Dabigatran, Argatroban
P-Anti-Xa-Aktivität unter Heparin, Rivaroxaban, Apixaban, Arixtra und Orgaran
P-APC-Resistenz
P-Fibrinospaltprodukte
P-Hemmkörper F-VIII
P-Hemmkörper F-IX
P-Heparin-assoziierte PF4-AK (HAT)
P-Lupus-Antikoagulanz
P-Plättchenfunktionsanalyse (PFA-200)
P-Reptilasezeit
P-Thrombozytenaggregometrie nach Born
B-Impedanzaggregometrie (Multiplate®) (z.B. Clopidogrel-, ASS-Resistenz)*

1.2.1. Blutbild

B-Hb	m	13.5 - 17.5	g/dl
	w	11.5 - 15.0	g/dl
B-Hk	m	39 - 51	%
	w	35 - 46	%
B-Erythrozyten	m	4.4 - 5.9	$\times 10^6/\mu\text{l}$
	w	3.9 - 5.1	$\times 10^6/\mu\text{l}$
B-MCV		81 - 95	fl
B-MCH		26.0 - 32.0	pg
B-MCHC		32.0 - 36.0	g/dl
B-Thrombozyten, CD61-Thrombozyten		150 - 350	$\times 10^3/\mu\text{l}$
B-Leukozyten		4.0 - 11.0	$\times 10^3/\mu\text{l}$
B-Lymphozyten		20 - 45	%
B-Monozyten		3 - 13	%
B-Eosinophile		≤ 8	%
B-Basophile		≤ 2	%
B-Neutrophile		40 - 76	%
B-Stabkernige		≤ 8	%
B-Retikulozyten		≤ 25	% _{oo}
Retikulozyten-Produktions-Index (RPI)		a)	
a) Bewertung bei Vorliegen einer Anämie:			
<2 Anämie mit hyporegenerativer Erythropoese			
>3 Anämie mit hyperregenerativer Erythropoese			
B-Retikulozyten-Hb-Gehalt (CHR)		28 - 35	pg

Erweitertes Untersuchungsspektrum

Ery-Morphologie (Fragmentozyten)

Differential-Blutbild

Morphologie peripheres Blut

Knochenmark-Zytologie (Morphologie Knochenmark, Eisenfärbung, POX-Färbung, Esterase-Färbung, Toluidinblaufärbung)

1.2.2. Durchflusszytometrie

CD34

PNH-Diagnostik

T/B/NK-Status

Kleiner Immunstatus (T-Zell-Quantifizierung)

Lymphom- und Leukämiediagnostik

1.3. Elektrolyte / Spurenelemente

P-Calcium		2.20 - 2.55	mmol/l
P-Calcium, ionisiert (B)		1.14 - 1.27	mmol/l
P-Chlorid		98 - 107	mmol/l
P-Eisen	m	11.6 - 31.3	$\mu\text{mol/l}$
	w	9.0 - 30.4	$\mu\text{mol/l}$
P-Kalium		3.5 - 4.6	mmol/l
P-KOD, kolloidosmotischer Druck		24 - 31	mmHg
S-Kupfer	m	11.0 - 22.0	$\mu\text{mol/l}$
	w	10.7 - 26.6	$\mu\text{mol/l}$
P-Magnesium		0.7 - 1.05	mmol/l
P-Natrium		136 - 145	mmol/l
S-Osmolalität		275 - 300	mosm/kg
P-Phosphor, anorganisch		0.74 - 1.52	mmol/l
S-Selen		0.64 - 1.52	$\mu\text{mol/l}$
S-Zink		10.0 - 23.0	$\mu\text{mol/l}$

1.4. Substrate

P-Ammoniak		31 - 123	$\mu\text{g/dl}$
P-Bilirubin, gesamt		0.3 - 1.2	mg/dl
P-Bilirubin, konjugiert		≤ 0.5	mg/dl
P-Cholesterol		$\leq 200^{\text{EG}}$	mg/dl

P-Cholesterol, HDL	m	> 40 ^{EG)}	mg/dl
P-Cholesterol, HDL	w	> 45 ^{EG)}	mg/dl
P-Cholesterol, Non-HDL		≤ 130 ^{EG)}	mg/dl
P-Cholesterol, LDL		< 116 ^{EG)}	mg/dl
S-Gallensäuren		≤ 6.0	µmol/l
C-Glucose		65 - 95	mg/dl
P-Glucose		70 - 100	mg/dl
P-Harnstoff-N	m	8 - 26	mg/dl
	w	10 - 20	mg/dl
P-Harnsäure	m	3.5 - 7.2	mg/dl
	w	2.6 - 6.0	mg/dl
P-Homocystein	m	5.5 - 16.2	µmol/l
	w	4.4 - 13.6	µmol/l
P-Kreatinin	m	0.70 - 1.20	mg/dl
	w	0.5 - 1.0	mg/dl
Kreatinin-Clearance	m	61 - 147	ml/min/1.73 m ² KO
	w	59 - 151	ml/min/1.73 m ² KO

Geschlechts- und altersabhängig. Nähere Einzelheiten zur Abnahme über die Befundauskunft Tel.: 8575.

eGFR (geschätzte GFR, CKD-EPI-Formel)		>60 ^{EG)}	ml/min/1.73 m ² KO
CKD-EPI-Formel	m	Krea ≤ 0,7 mg/dl = 144 x [P-Kreatinin (mg/dl)/0,7] ^{-0,329} × (0,993) ^{Alter}	
	w	Krea > 0,7 mg/dl = 144 x [P-Kreatinin (mg/dl)/0,7] ^{-1,209} × (0,993) ^{Alter}	
	m	Krea ≤ 0,9 mg/dl = 141 x [P-Kreatinin (mg/dl)/0,9] ^{-0,411} × (0,993) ^{Alter}	
	w	Krea > 0,9 mg/dl = 141 x [P-Kreatinin (mg/dl)/0,9] ^{-1,209} × (0,993) ^{Alter}	
		Für ethnische Zugehörigkeit mit schwarzer Hautfarbe jeweils x 1,159	
P-Lactat		0.5 - 2.2	mmol/l
P-Metanephrine		≤ 90	ng/l
P-Normetanephrine		≤ 150	ng/l
B-Serotonin		50 - 200	µg/l
P-Triglyceride		≤ 150 ^{EG)}	mg/dl

1.5. Enzymaktivitäten (37°C)

P-Alanin-Aminotransferase (ALT)	m	≤ 45	U/l
	w	≤ 34	U/l
P-Aspartat-Aminotransferase (AST)	m	≤ 35	U/l
	w	≤ 31	U/l
P-Alkalische Phosphatase (AP)		40 - 150	U/l
P-Cholinesterase (CHE)	m	4389 - 10928	U/l
	w	2879 - 12669	U/l
P-Creatinkinase (CK)	m	30 - 200	U/l
	w	29 - 168	U/l
P-CK-MB		< 25	U/l
P-γ-Glutamyl-Transferase (γ-GT)	m	12 - 64	U/l
	w	9 - 36	U/l
P-Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)	m	≤ 7.0	U/l
	w	≤ 5.0	U/l
P-Lactat-Dehydrogenase (LDH)		125 - 250	U/l
P-Lipase		<60	U/l
P-Pankreas-Amylase		8 - 51	U/l

1.6. Erythrozyten-Enzyme ^{RW)}

E-Thiopurin-S-Methyltransferase (TPMT)		< 2.8 ^{a)}	nmol/(ml Ery × h)
		< 10.0 ^{b)}	nmol/(ml Ery × h)

^{a)} Homozygote TPMT Defizienz wahrscheinlich. ^{b)} Heterozygote TPMT Defizienz wahrscheinlich, beachte Induktion durch Azathioprin bzw. 6-Mercaptopurin.

1.7. Proteine

P-α ₁ -Antitrypsin		0.9 - 2.0	g/l
P-Albumin		3.4 - 5.0	g/dl
P-Apolipoprotein A1	m	0.95 - 1.86	g/l
	w	1.01 - 2.23	g/l
P-Apolipoprotein B		<0.1	g/l
B-BNP		≤ 100 ^{a)}	ng/l

^{a)} Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundausdrücken

P-NT-proBNP		< 125 ^{a)}	ng/l
^{a)} Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundausdrücken			
P-Coeruloplasmin		20 - 60	mg/dl
P-C-reaktives Protein (CRP)		≤ 5.0 ^{a)}	mg/l
^{a)} CRP zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos: < 1 mg/l (niedriges Risiko), 1-3 mg/l (durchschnittliches Risiko), >3 mg/l (hohes Risiko). Diese Entscheidungsgrenzen gelten nur in Abwesenheit einer Akute-Phase-Reaktion.			
P-Cystatin C		0.4 - 0.99	mg/l
S-Ferritin	m	22 - 275	µg/l
	w	5 - 204	µg/l
P-Hämoglobin, freies*		≤ 10	mg/dl
B-Hämoglobin A _{1c} (HbA _{1c} , DCCT)		<5.7	%
P-Haptoglobin		0.14 - 2.58	g/l
P-IL-6		<7.0	pg/ml
S-IL-1B		<5	pg/ml
S-IL-2R		223 - 710	IU/ml
P-Lp(a) [Lipoprotein(a)]		< 0.30 ^{EG)}	g/l
P-Myoglobin	m	≤ 155	µg/l
	w	≤ 106	µg/l
P-NT-pro ANP		< 1.95	nmol/l
S-Osteocalcin			
P-Procalcitonin (PCT)		< 0.07	µg/l
P-Protein gesamt		6.6 - 8.3	g/dl
S-TNF-α		≤ 8.1	pg/ml
P-Transferrin	m	163 - 344 ^{a)}	mg/dl
	w	173 - 360 ^{a)}	mg/dl
^{a)} Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundausdrücken			
P-Transferrin-Sättigung	m	14 - 53	%
	w	11 - 52	%
P-löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)		0.9 - 2.3	mg/l
P-Troponin I <i>hs</i> , kardiales	m	≤ 34.2 ^{EG)}	ng/l
	w	≤ 15.6 ^{EG)}	ng/l
^{EG)} 99. Perzentile der Troponin-I Konzentration eines gesunden Referenzkollektivs.			
P-Troponin T <i>hs</i> , kardiales		≤ 14 ^{EG)}	ng/l
^{EG)} 99. Perzentile der Troponin-T Konzentration eines gesunden Referenzkollektivs.			

1.8. Elektrophorese

S-Albumin		55.8 - 66.1	%
S-α ₁ -Globulin		2.9 - 4.9	%
S-α ₂ -Globulin		7.1 - 11.8	%
S-β ₁ -Globulin		4.7 - 7.2	%
S-β ₂ -Globulin		3.2 - 6.5	%
S-γ-Globulin		11.1 - 18.8	%
S-Protein gesamt		6.6 - 8.3	g/dl

1.9. Vitamine

S-Vitamin A		300 - 800	µg/l
B-Vitamin B ₁		28.0 - 85.0	µg/l
S-Vitamin B ₆		4.0 - 20.0	µg/l
S-Vitamin B ₁₂		187 - 883	ng/l
S-Vitamin D ₃ (25-OH-Cholecalciferol) ^{a)}		20 - 100 ^{a)}	µg/l
^{a)} Empfohlener Bereich 30-60 µg/l, Toxizität bei >150 µg/l zu erwarten			
S-Vitamin E (α-Tocopherol)		4.0 - 18.0	mg/l
S-Folsäure		3.1 - 20.5	µg/l
S-aktives B12		≥ 50	pmol/l

1.10. Blutgasanalyse incl. Oxymetrie

Die folgenden Referenzbereiche beziehen sich auf arterielles Blut.

Bezugswerte für Körpertemperatur: 37°C

Hämoglobin: 15 g/dl

B-pH		7.35 - 7.45	
B-pCO ₂		36 - 42	mmHg
B-HCO ₃ , aktuell		20 - 27	mmol/l
B-Base Excess (BE extrazelläre Flüssigkeit)		- 2 bis + 3	mmol/l
B-pO ₂ (Alter und Broca-Index beachten)		65 - 105	mmHg
B-O ₂ -Sättigung		94 - 98	%
B-Hb	m	13.5 - 17.5	g/dl

	w	11.5 - 15.0	g/dl
B-MetHb		≤ 2	%
B-COHB		≤ 3 ^{a)}	%

^{a)} Raucher ≤ 10 %

1.10.1. POCT-Analyse

B-Calcium, ionisiert (P)		1.14 - 1.27	mmol/l
B-Chlorid (P)		98 - 107	mmol/l
B-Glucose (P, arteriell)		65 - 110	mg/dl
B-Kalium (P)		3.5 - 4.6	mmol/l
B-Lactat (P, arteriell)		≤ 1.8	mmol/l
B-Natrium (P)		136 - 145	mmol/l

1.11. Tumormarker

S-AFP		1 - 9	µg/l
S-CA 125		≤ 35	kU/l
S-CA 15-3		≤ 31.3	kU/l
S-CA 19-9		≤ 37	kU/l
S-Calcitonin	m	≤ 11.8	ng/l
	w	≤ 4.8	ng/l
S-CEA		≤ 5	µg/l
S-Chromogranin A		≤ 100	µg/l
S-CYFRA 21-1		≤ 2.1	µg/l
S-β-HCG	m	≤ 6.5	IU/l
	w	≤ 0.9	IU/l
S-NSE		≤ 18.3	µg/l
S-PSA		≤ 4.0 ^{RW)}	µg/l
freies PSA/PSA		> 0.26 ^{RW)}	
S-S100		≤ 0.15	µg/l

1.12. Pharmaka (Drug Monitoring) ^{TB)}

Antibiotika

P-Amikacin (min)		≤ 1	mg/l
P-Amikacin (max)		kein TB bekannt	mg/l
P-Ampicillin		kein TB bekannt	mg/l
P-Cefotaxim		0.5 - 40	mg/l
P-Cefuroxim		kein TB bekannt	mg/l
P-Ceftazidim		kein TB bekannt	mg/l
P-Ciprofloxacin		kein TB bekannt	mg/l
P-Ceftriaxon		kein TB bekannt	mg/l
P-Daptomycin		kein TB bekannt	mg/l
P-Flucloxacillin + freies Flucloxacillin		kein TB bekannt	mg/l
P-Gentamicin (min)		≤ 1	mg/l
P-Gentamicin (max)		kein TB bekannt	mg/l
P-Linezolid		2 - 10	mg/l
P-Meropenem		kein TB bekannt	mg/l
P-Penicillin G		kein TB bekannt	mg/l
P-Piperacillin		1.0 - 5.0	mg/l
P-Tazobactam		kein TB bekannt	mg/l
P-Tobramycin (min)		≤ 1	mg/l
P-Tobramycin (max)		kein TB bekannt	mg/l
P-Vancomycin (min)		15 - 20 ^{a)}	mg/l

^{a)} Talspiegel 15-20 mg/l bei Bakteriämie, Osteomyelitis, Meningitis, Pneumonie, Endocarditis und schweren Haut-/Weichteilinfektionen (nekrotisierende Fasziiitis).

Antidepressiva

P-Amitriptylin + Nortriptylin		80 - 200 ^{a)}	µg/l
P-Citalopram + Desmethylcitalopram		50 - 110	µg/l
P-Clomipramin + Norclomipramin		230 - 450 ^{a)}	µg/l
P-Desipramin		100 - 300	µg/l
P-Doxepin + Nordoxepin		50 - 150 ^{a)}	µg/l
P-Duloxetin		30 - 120	µg/l
P-Escitalopram		15 - 80	µg/l
P-Fluoxetin + Norfluoxetin		120 - 500 ^{a)}	µg/l
P-Fluvoxamin		60 - 230	µg/l
P-Imipramin + Desipramin		175 - 300 ^{a)}	µg/l

P-Maprotilin	75 - 130	µg/l
P-Mirtazapin + Desmethyilmirtazapin	30 - 80	µg/l
P-Nortriptylin	70 - 170	µg/l
P-Paroxetin	20 - 65	µg/l
P-Sertralin + Desmethylsertralin	10 - 150	µg/l
P-Trimipramin	150 - 300	µg/l

P-Venlafaxin + O-Desmethylvenlafaxin	100 - 400 ^{a)}	µg/l
--------------------------------------	-------------------------	------

a) Summe Muttersubstanz plus pharmakologisch aktiver Metabolit

Anxiolytika

P-Alprazolam + α-OH-Alprazolam	5 - 50	µg/l
P-Bromazepam + 3-OH-Bromazepam	50 - 200	µg/l
P-Clonazepam + 7-Aminoclonazepam	4 - 80	µg/l
P-Diazepam	< 3000	µg/l
P-Nordiazepam	120 - 800	µg/l
P-Oxazepam	200 - 1500	µg/l
P-Temazepam	600 - 1100	µg/l
P-Lorazepam	30 - 100	µg/l
P-Zolpidem	80 - 160	µg/l
P-Zopiclon	55 - 85	µg/l

Antikonvulsiva

P-Carbamazepin	16.9 - 50.8	µmol/l
P-Carbamazepin Epoxid	2.3 - 11.7	µmol/l
P-10-OH-Carbamazepin	50 - 140 ^{RW)}	µmol/l
P-Eslicarbamazepin	50 - 140 ^{a)}	µmol/l
P-Ethosuximid	283 - 708	µmol/l
P-Felbamat	20 - 100	mg/l
P-Gabapentin	2 - 20	mg/l
P-Lacosamid	1 - 10	mg/l
P-Lamotrigin	2 - 10 ^{RW)}	mg/l
P-Levetiracetam	10 - 40 ^{RW)}	mg/l
P-N-Desmethylnmethsuximid (NDMS)	10 - 40	mg/l
P-Oxcarbazepin	10 - 35	mg/l
P-Perampanel	0,18 - 0,98	mg/l
P-Phenobarbital	43 - 172	µmol/l
P-Phenytoin, gesamt	40 - 80	µmol/l
P-Phenytoin, frei	4 - 8	µmol/l
P-Primidon	23 - 46	µmol/l
P-Pregabalin	2 - 5	mg/l
P-Retigabin	45 - 90	mg/l
P-Rufinamid	5 - 30	mg/l
P-Stiripentol	1 - 10	mg/l
P-Sultiam	2 - 8	mg/l
P-Tiagabin	0,02 - 0,3	mg/l
P-Topiramamat	2 - 10 ^{RW)}	mg/l
P-Valproinsäure	346.5 - 693.0	µmol/l
P-Vigabatrin	2 - 10	mg/l
P-Zonisamid	9.5 - 38	mg/l

Antimykotika

P-Caspofungin		
P-Itraconazol	0.4 - 2.0	mg/l
P-Posaconazol	kein TB bekannt	mg/l
P-Voriconazol	2 - 6	mg/l

Antineoplastische Medikamente

P-Erlotinib		
P-Imatinib + Desmethylimatinib		
P-Methotrexat 24 h	≤ 10	µmol/l
P-Methotrexat 48 h	≤ 1.0	µmol/l
P-Methotrexat 72 h	≤ 0.1	µmol/l
hochdosierte Therapie; Infusion über 4-6 h		
P-Nilotinib	kein TB bekannt	mg/l
P-Sunitinib	kein TB bekannt	mg/l

Immunsuppressiva

B-Ciclosporin (min)		100 - 300	µg/l
	Initialtherapie (ca. ≤ 3 Monate nach Transplantation)	Erhaltungstherapie	
Niere	150 - 225	100 - 150	µg/l
Leber	225 - 300	100 - 150	µg/l
Herz	250 - 350	150 - 250	µg/l
	GvHD Prophylaxe < 100 Tage (- 300)	GvHD Behandlung (mit zusätzlicher Gabe von Steroiden)	
Stammzellen	200 - 250	150 - 200	µg/l
B-Tacrolimus (min)		4 - 15	µg/l
	Initialtherapie (ca. ≤ 3 Monate nach Transplantation)	Erhaltungstherapie	
Niere	9.0 - 13.0	4.0 - 9.0	µg/l
Leber	9.0 - 13.0	4.0 - 9.0	µg/l
Herz	9.0 - 15.0	7.0 - 13.0	µg/l
	GvHD Prophylaxe	GvHD Behandlung (mit zusätzlicher Gabe von Steroiden)	
Stammzellen	4.0 - 10.5	4.0 - 10.5	µg/l
P-Mycophenolsäure (MPA, min)			
Komedikation Ciclosporin		1.3 - 3.5 ^{TB)}	mg/l
Komedikation Tacrolimus		1.0 - 3.5 ^{TB)}	mg/l
P-MPA-AUC (0-12 h)		30 - 60 ^{TB)}	mg×h/l
^{TB)} Vorläufiger TB für MPA in der frühen Phase (<3 Monate) nach Nierentransplantation. Die angegebenen Talkonzentrationen erzielen im allgemeinen die angestrebte AUC. Für die Erhaltungstherapie und Therapie mit „enteric coated MPA“ liegen keine TB vor.			
B-Sirolimus (min)			
Nierentransplantation, Tripeltherapie mit Ciclosporin, Corticosteroiden und Sirolimus		4.0 - 12.0	µg/l
Dualtherapie mit Sirolimus und Corticosteroiden		12.0 - 20.0	µg/l
Lebertransplantation, Therapie mit Ciclosporin oder Tacrolimus, Sirolimus und ggf. Corticosteroiden		3.0 - 6.0	µg/l
Therapie mit Sirolimus und ggf. Corticosteroiden		5.0 - 8.0	µg/l
B-Everolimus (min)			
Tripeltherapie mit Ciclosporin, Corticosteroiden und Everolimus		3.0 - 8.0	µg/l
E-6-Thioguanin-Nukleotide (6-TGN)			
Organtransplantation (Tripeltherapie mit Azathioprin)		100 - 450	pmol/0.8×10 ⁹ Erys
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Azathioprin)		250 - 450	pmol/0.8×10 ⁹ Erys
Chemotherapie (6-Mercaptopurin)		500 - 1000	pmol/0.8×10 ⁹ Erys
E-6-Methyl-Mercaptopurin (6-MMP)		< 5700 ^{RW)}	pmol/0.8×10 ⁹ Erys
Kardiaka			
P-Amiodaron + Desethylamiodaron		1.0 - 2.5	mg/l
S-Digitoxin		13 - 33	nmol/l
P-Digoxin		1.0 - 2.6 ^{TB)}	nmol/l
^{TB)} bei Herzinsuffizienz (Sinusrhythmus): 0.6 - 1.2 nmol/l			
Neuroleptika			
P-Aripiprazol		100 - 350	µg/l
P-Clozapin + Desmethylclozapin		350 - 600	µg/l
P-Haloperidol		1 - 10	µg/l
P-Olanzapin		20 - 80	µg/l
P-Quetiapin		100 - 500	µg/l
P-Risperidon + 9-OH-Risperidon		20 - 60 ^{a)}	µg/l
^{a)} Summe Muttersubstanz plus pharmakologisch aktiver Metabolit			
Sonstige			
P-Ganciclovir		s. Befundausdruck	mg/l
S-Lithium		0.60 - 1.20	mmol/l
P-Paracetamol		10 - 30	mg/l
P-Theophyllin		56 - 111	µmol/l

1.13. Endokrinologie

Abkürzungen: FP Follikelphase, FFP frühe Follikelphase, SFP späte Follikelphase, OP Ovarialphase, LP Lutealphase, PrM Prämenopause, PM Postmenopause

P-Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)		4.7 - 48.8	ng/l
S-Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE)		20 - 70	IU/l
S-Aldosteron	stehend	25.2 - 392	ng/l
	Rückenlage	17.6 - 232	ng/l
S-Androstendion	m	0.33 - 1.34	µg/l
	w	0.26 - 2.14	µg/l
	w PM	0.13 - 0.82	µg/l
S-Cortisol	vor 10 h	37 - 194	µg/l
	nach 17 h	29 - 173	µg/l
P-C-Peptid		0.78 - 5.19	ng/ml
S-Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)		a)	µg/dl
a) Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundaussdrucken			
S-Erythropoetin (EPO)		4.3 - 29.0	mIU/ml
S-Estradiol (E ₂)	m	11 - 44	ng/l
	w FP	21 - 251	ng/l
	w OP	38 - 649	ng/l
	w LP	21 - 312	ng/l
	w PM	< 28	ng/l
S-Follikel-stimulierendes Hormon (FSH)	m	1.0 - 12.0	IU/l
	w FP	3.1 - 8.1	IU/l
	w OP	2.6 - 16.7	IU/l
	w LP	1.4 - 5.5	IU/l
	w PM	26.7 - 133.4	IU/l
S-Humanes Choriongonadotropin (HCG)		≤ 5.0 ^{EG})	IU/l
S-Human Growth Hormone (HGH)	w	≤ 6.88	µg/l
	m	≤ 1.23	µg/l
P-Insulin		2.1 - 22.0	mIU/ml
S-Insulin-like Growth Factor 1 (IGF1)		a)	µg/l
a) Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundaussdrucken			
S-Luteinisierendes Hormon (LH)	m	0.6 - 12.1	IU/l
	w FP	1.8 - 11.8	IU/l
	w OP	7.6 - 89.1	IU/l
	w LP	0.6 - 14.0	IU/l
	w PM	5.2 - 62.0	IU/l
S-Parathormon, intakt (PTH)		18.1 - 88.5	ng/l
S-Progesteron	m	< 0.1 - 0.2	µg/l
	w FP	< 0.1 - 0.3	µg/l
	w LP	1.2 - 15.9	µg/l
	w PM	< 0.1 - 0.2	µg/l
S-17-OH-Progesteron	m	0.25 - 1.39	µg/l
	w FP	0.20 - 1.00	µg/l
S-Prolaktin	m	72.7 - 407.4	mIU/l
	w	108.8 - 557.1	mIU/l
S-Prolaktin-Index (nach PEG Fällung)		> 60	%
S-Renin	stehend	4.4 - 46.1	µIU/ml
	Rückenlage	2.8 - 39.9	µIU/ml
S-Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG)	m	17.1 - 77.6	nmol/l
	w PrM	26.1 - 110.0	nmol/l
	w PM	14.1 - 68.9	nmol/l
S-Testosteron		a)	µg/l
S-Testosteron, freies		a)	µg/l
a) Geschlechts- und altersabhängige Referenzintervalle auf den jeweiligen Befundaussdrucken			
P-Thyreidea stimulierendes Hormon (TSH)		0.35 - 4.94	mIU/l
P-Trijodthyronin, freies (fT3)		1.58 - 3.91	ng/l
P-Thyroxin, freies (fT4)		7.0 - 14.8	ng/l
S-Thyreoglobulin (TG)		3.5 - 77.0	µg/l
S-Thyreoglobulin-Autoantikörper (Anti-TG)		< 14	IU/ml
S-Thyroidperoxidase-Autoantikörper (Anti-TPO)		< 6	IU/ml
S-TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK)		< 1.8	IU/l

1.14. Immun- und Paraprotein-Diagnostik

S-Antistreptolysin (ASL)		≤ 214	IU/ml
--------------------------	--	-------	-------

S-Anti-DNAse B	≤ 200	U/ml
S-CH50	41.68 - 95.06	U/ml
S-Freie Leichtketten Kappa	3.3 - 19.4	mg/l
S-Freie Leichtketten Lambda	5.71 - 26.3	mg/l
S-Hevylite IgG Kappa*	3.84 - 12.07	g/l
S-Hevylite IgG Lambda*	1.91 - 6.74	g/l
S-Hevylite IgA Kappa*	0.57 - 2.08	g/l
S-Hevylite IgA Lambda*	0.44 - 2.04	g/l
S-IgA	0.63 - 4.84	g/l
S-IgD		U/ml
S-IgG	5.4 - 18.2	g/l
S-IgG4	0.03 - 2.01	g/l
S-IgE	≤ 100	klU/l
S-IgM	0.22 - 2.93	g/l
S-Immunfixation		
P-Komplement C3c	0.82 - 1.93	g/l
P-Komplement C4	0.15 - 0.57	g/l
S-C1-Inhibitor-Konzentration	21 - 39	mg/dl
S-Funktionelles C1-Esterase-Inhibitor Protein	≥68	%

1.14.1. Autoantikörperbestimmung

P-CCP-AK	<5.0	IU/ml
S-Anti-Cardiolipin-AK		
S-Anti-mitochondriale-Antikörper (AMA) Screen und Spezifizierung (M2, M2-E)		
S-Anti-neutrophile-cytoplasmatische Antikörper (ANCA) Screen und Spezifizierung (cANCA, pANCA, BPI)		
S-Anti-glomeruläre Basalmembran AK (anti-GBM)		
S-Anti-nukleäre Antikörper (ANA) Screen und Spezifizierung (Centromer, dsDNA, Histon, Mi-2, SS-B/SS-A, Scl-70, U1-SnRNP, Fibrillarin, Rib-P, PML, PM-SCL-75/100, Ku, SP100, gp210)		
S-Anti-smooth-muscle Antikörper (ASMA) Screen und Spezifizierung		
S-Anti-cytoplasmatische AK Screen und Spezifizierung (Ro52, EJ, OJ, Jo 1, SRP)		
S-Anti-Leber-AK Screen und Spezifizierung (LKM-1, LC-1)		
S-Anti-Transglutaminase -IgA AK		
S-Anti-deamidated Gliadin-IgG AK		
S- β2-Glykoprotein AK		
S-Rheumafaktor		
S-Zirkulierende Immunkomplexe C1q (CIC)		

2. DROGEN-SCREENING

S-CDT (Carbohydrate-deficient Transferrin)	<1,3	%
P-Benzodiazepine		
B-Ethanol	<0,0	o/oo
P-Trizyklische Antidepressiva		
U-Amphetamine (incl. MDMA [Ecstasy])		
U-Barbiturate		
U-Benzodiazepin-Metabolite (auch semiquantitativ)		
U-Cannabinoide (auch semiquantitativ)		
U-Cocain-Metabolit (Benzoylcegonin)		
U-Ethanol		
U-Ethylglucuronid	≤ 0.1	mg/d
U-Ethylsulfat	≤ 0.014	mg/d
U-Methadon (auch semiquantitativ)		
U-Morphinderivate		

3. URIN

3.1. Semi-qualitative Urinanalytik

U-Urinstatus		
U-Sediment		
U-Schwangerschaftstest		
U-Porphobilinogen (Watson-Schwartz Test)		

3.2. Elektrolyte

U-Calcium	2.5 - 7.5	mmol/d
-----------	-----------	--------

U-Chlorid		110 - 250	mmol/d
U-Kalium		25 - 125	mmol/d
U-Kupfer		0.06 - 0.50	µmol/d
U-Natrium		40 - 220	mmol/d
U-Phosphor, anorganisch		12.9 - 42.0	mmol/d
U-Osmolalität		50 - 1200	mosm/kg
U-Konzentrationstest (12 Std. Flüssigkeitsrestriktion)		> 850	mosm/kg

3.3. Substrate

U-δ-Aminolävulinsäure		≤ 53	µmol/d
U-Crosslinks	m	2.3 - 5.4	nmol DPD/mm
	w	3.0 - 7.4	nmol DPD/mm
U-Glucose		≤ 500	mg/d
U-Harnsäure		250 - 750	mg/d
U-Harnstoff-N		12 - 20	g/d
U-5-Hydroxyindolessigsäure		≤ 7.0	mg/d
U-Kreatinin	m	870 - 2410	mg/d
	w	670 - 1590	mg/d
U-freie Metanephriene			µg/g U-Kreatinin
U-freie Normetanephriene			µg/g U-Kreatinin
U-Porphyrine, gesamt		< 150	µg/d
U-Coproporphyrin I		< 25	µg/d
U-Coproporphyrin III		< 75	µg/d
U-Heptacarboxyporphyrin		< 5	µg/d
U-Hexacarboxyporphyrin		< 2	µg/d
U-Pentacarboxyporphyrin		< 5	µg/d
U-Uroporphyrin		< 25	µg/d
U-Vanillinmandelsäure		≤ 6.5	mg/d

3.4. Proteine, Immunglobuline, Endokrinologie

U-Albumin (Sammelurin)		≤ 30	mg/d
U-Albumin (Spontanurin)		≤ 30	mg/g U-Kreatinin
U-Cortisol	m	≤ 60	µg/d
	w	≤ 43	µg/d
U-IgG		≤ 15	g/d
		<9.6	mg/l
U-Kappa Leichtketten			mg/l
U-Lambda Leichtketten			mg/l
U-Protein		< 300	mg/d
		10-140	mg/l
U-α1-Mikroglobulin		≤ 20	mg/d
		<12	mg/l
U-α2-Makroglobulin		≤ 20	mg/d

4. SPEICHEL

Sp-Cortisol	a)		µg/l
Sp-17-OH-Progesteron	a)		µg/l
a) derzeit kein Referenzintervall bekannt			

5. LIQUOR

L-Glucose	a)		mg/dl
a) Bewertung im Zusammenhang mit der Blut-Glukosekonzentration			
L-Lactat		1.1 - 2.4 ^{b)}	mmol/l
b) gilt nur für lumbalen Liquor			
L-NSE		≤ 14.6 ^{RW)}	µg/l
L-S100		≤ 2.2	µg/l

6. SYNOVIA

Mikroskopie (Zelldifferenzierung und Kristalle)			
Synovia-Zellzahl (kernhaltig)		≤ 0.2	×10 ³ /µl

7. VIRUSDIAGNOSTIK

P-CMV-DNA	Diagnose und Verlaufskontrolle der CMV-Infektion (Primärinfektion); Kontrolle einer möglichen Reaktivierung, insbesondere unter Immunsuppression.
P-HIV 1-RNA	direkter HIV-1-Nachweis, vor oder unter antiretroviraler Therapie (ART),
S-/P-Adeno (IgG, IgA)	Serologie bei Atemwegsinfektionen, Konjunktivitis, Gastroenteritis, Infektionen bei Immungeschwächten.
S-/P-Anti-HBe	Verlauf bei Hepatitis B und früher Rekonvaleszenzmarker.
S-/P-Anti-HBs	Verlaufskontrolle der Hepatitis B, Überprüfung des Impferfolges nach Impfung.
S-/P-Anti-HCV	Screening-Test der Hepatitis C.
S-/P-HCV Bestätigungstest	Bestätigung eines reaktiven HCV-Screening
S-/P-Anti-HTLV 1-2	HTLV-1- oder HTLV-2-Infektion, Screeningtest.
S-/P-CMV (IgG, IgM)	Diagnose der primären CMV-Infektion; außerdem Bestimmung der Immunitätslage vor einer geplanten Schwangerschaft. IgM-Bestimmung: Differenzialdiagnose bei mononukleoseartigem Krankheitsbild, unklarem Fieber mit Thrombopenien, Hepatitis oder Splenomegalie oder bei auffälliger Schwangerschaft.
S-/P-Cosackievirus (IgG, IgM)	Serologie bei Myokarditis, Perikarditis unklarer Genese, akute hämorrhagische Konjunktivitis, Verdacht auf Herpangina oder Pleurodynie, Guillain-Barré-Syndrom; Hand-Fuß-Krankheit.
S-/P-EBV-EBNA (IgG)	Ermittlung des EBV Status, Verdacht bei Mononukleoseartigem Krankheitsbild, unklarem Fieber mit Thrombozytopenien, Hepatitis oder Splenomegalie.
S-/P-EBV-VCA (IgG, IgM)	Bei Verdacht auf frische EBV-Infektion oder Reaktivierung unter Immunsuppression.
S-/P-ECHO-Virus (IgG, IgM)	Verdacht auf Myokarditis, Perikarditis unklarer Genese, akute hämorrhagische Konjunktivitis, Verdacht auf Herpangina oder Pleurodynie, Guillain-Barré-Syndrom; Hand-Fuß-Krankheit.
S-/P-Hantaan-Virus (IgG, IgM)	Serologie bei abrupt einsetzendem Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, abdominelle Schmerzen, temporäre Niereninsuffizienz, Differenzierungstest nach positivem Suchtest. IgM; Abrupt einsetzendes Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, abdominelle Schmerzen, temporäre Niereninsuffizienz, Verdacht auf Hantafieber, Nephropathia epidemica.
S-/P-HAV (IgG, IgM)	IgG-Serologie; Immunstatus von Hepatitis A. IgM-Serologie; Diagnose einer akuten Hepatitis A
S-/P-HBc (IgG, IgM)	IgG-Serologie; Screening auf Hepatitis B. IgM-Serologie; Verlauf und Stadieneinteilung bei Hepatitis B.
S-/P-HBe-Antigen	Verlauf und Stadieneinteilung bei Hepatitis B; Hinweis auf Infektionsrisiko.
S-/P-HBs-Antigen	Der Nachweis von HBsAg spricht immer für eine akute oder eine chronische HBV-Infektion.
S-/P-HBV-DNA	Infektionsmarker und Einsatz bei Therapiemonitoring bei Hepatitis B.
S-/P-HCV-RNA	Abklärung der Virusreplikation, Indikationsstellung der antiviralen Therapie sowie Überprüfung des Behandlungserfolgs.
S-/P-HEV (IgG, IgM)	Screening der Hepatitis E.
S-/P-HIV Antigen-Antikörper	HIV-1- oder HIV-2-Infektion-Screening-Test.
S-/P-HIV 1/2 Bestätigungstest	Bestätigung nach positivem Suchtest.
S-/P-Influenza A (IgG, IgA)	Diagnosestellung bei Patienten, die länger krank sind; dient hauptsächlich epidemiologischen Fragestellungen.
S-/P-Influenza B (IgG, IgA)	Diagnosestellung bei Patienten, die länger krank sind; dient hauptsächlich epidemiologischen Fragestellungen.

S-/P-Parvovirus B19 (IgG, IgM)	Bestimmung zur Erhebung des Immunstatus oder zur initialen Abklärung verdächtiger Symptome wie ringförmiges und girlandenförmiges makulopapulöses Exanthem, evtl. Arthritis; Komplikationen: Anämie, Thrombo-, Neutro- oder Panzytopenie, Myokarditis, Hepatitis; in der Schwangerschaft: 1. Trimenon: Spontanabort; 2. Trimenon: Hydrops fetalis, Fruchttod; 3. Trimenon: aplastische Phasen ohne Schädigung.
S-/P-Röteln (IgG, IgM)	Bestimmung des Immunstatus, prä- / postnatale Diagnose, konnatale Rötelninfektion. IgM-Bestimmung bei Verdacht auf akute Rötelnvirusinfektion, prä- / postnatale Diagnose, konnatale Röteln.
S-/P-HSV (IgG, IgM)	IgG-Bestimmung für den HSV-Immunstatus; IgM-Bestimmung kann bei Primärinfektionen als auch bei Rezidiven eingesetzt werden wie Herpes labialis, Herpes genitalis, bei Kleinkindern und Säuglingen auch Enzephalitis, Krampfanfälle, Hepatitis, Herpes neonatorum.
S-/P-Masern (IgG, IgM)	IgG-Bestimmung des Immunstatus; IgM-Bestimmung bei akuter Infektion wie Fieber, Konjunktivitis, Rhinitis, Enanthem am Gaumen, großfleckiges konfluierendes Exanthem mit kraniokaudaler Ausbreitung; Komplikationen: Otitis media, Masernpneumonie, Masernenzephalitis: akute postinfektiöse Masernenzephalitis, Maserneinschlusskörper-Enzephalitis, subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE).
S-/P-Mumps (IgG, IgM)	IgG zur Bestimmung des Immunstatus; IgM zur Bestimmung bei akuter Infektion; Reinfektion und bei Verdacht auf Parotitis; Komplikationen: Pankreatitis, Orchitis, Meningitis, Innenohrschwerhörigkeit.
S-/P-VZV (IgA, IgG, IgM)	IgG zur Bestimmung des Immunstatus; IgM bei Exanthem, konnatale Infektion, prä- / postnatale Diagnose.
Ab-SARS-CoV-2 RNA	Qualitativer Erregerdirektnachweis.

8. MOLEKULARE DIAGNOSTIK

Antikoaguliertes Vollblut: EDTA, Heparinat, Citrat (Transport bei Raumtemperatur)

α_1 -Antitrypsin (SERPINA1) - α_1 -Antitrypsin Mangel

Es werden die am häufigsten einen α_1 -Antitrypsin Mangel verursachenden Defektallele *PI*S* (E264V) und *PI*Z* (E342K) genotypisiert.

Folgende Genotypen können nachgewiesen werden: *PI*MM* (Wildtyp); *PI*SS*; *PI*SZ*; *PI*ZZ*; *PI*MS*; *PI*MZ*.

Apolipoprotein B-100^{a)} - Hypercholesterolämie

Es wird die Mutation nachgewiesen, die im Apolipoprotein B-100 zum R3500Q oder R3500W Austausch führt. Folge ist eine Hypercholesterolämie.

Apolipoprotein E - sporadische Alzheimer-Krankheit, Typ III-Hyperlipoproteinämie

Folgende Genotypen werden nachgewiesen: E2/E2; E2/E3; E2/E4; E3/E4; E3/E3; E4/E4.

Eine E2/E2 Homozygotie kombiniert mit einer Fettstoffwechselstörung führt zur Typ III-Hyperlipoproteinämie mit entsprechend erhöhtem kardiovaskulären Risiko.

Das *Apo-E4* Allel ist ein genetischer Risikofaktor für die sporadische Alzheimer-Krankheit. *Apo-E4* Allele sind mit einem niedrigeren Alter bei Krankheitsbeginn assoziiert und erhöhen das Erkrankungsrisiko in Abhängigkeit von der Gendosis.

ATPase7B^{a)} - Morbus Wilson

Es wird die *ATP7B* H1069Q Mutation genotypisiert. Diese Mutation findet sich bei ca. 50% der Europäer mit M. Wilson. Zur Manifestation der autosomal rezessiven Erkrankung ist das Vorliegen eines weiteren Defektalleles nötig.

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPYD)^{a)} - 5-Fluorouracil-Toxizität

DPYD ist das Schlüsselenzym des Pyrimidinabbaus. Das Vorliegen der Polymorphismen: *DPYD*2A* (IVS14+1G>A), *DPYD*13* (c.1679T>C; rs55886062), c.2846A>T (rs67376798) oder Haplotyp B3 (c.1236G>A; c.1129-5923C>G) kann zu einer DPYD-Defizienz führen. In diesen Fällen sind bereits bei gebräuchlichen 5-Fluorouracil Dosierungen schwere Nebenwirkungen zu erwarten. In diesem Fall sollte eine 5-FU Therapie nur nach einer mittels 5-FU Kinetik individuell angepassten Dosierung durchgeführt werden.

Faktor V Leiden^{a)} – Thrombophilie

Es wird die 1691G>A Mutation nachgewiesen, die im Faktor V zu einem R506Q Austausch führt. Diese Mutation bewirkt eine Resistenz gegen aktiviertes Protein C. Es besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Thrombose. Bei heterozygoter Mutation besteht ein 5-10faches relatives Risiko für das Auftreten einer Thrombose, bei homozygoter Mutation ein 50-100faches Risiko.

HFE^{a)} - genetische Hämochromatose

Es werden Defektallele nachgewiesen, die häufig mit dem Auftreten der genetischen Hämochromatose assoziiert sind (C282Y, H63D). Dabei geht die homozygote C282Y Mutation mit dem höchsten Risiko einher.

Lactase (LCT) ^{a)} - Laktose-Intoleranz (Hypolaktasie, adulte Form)

Es wird die für eine Laktose-Intoleranz (Hypolaktasie, adulte Form) verantwortliche Mutation im Lactase-Gen (*LCT* - 13910T>C) nachgewiesen. Der homozygote Genotyp führt zu einer autosomal rezessiven Laktose-Intoleranz. Die Manifestation findet bei Kindern europäischer Herkunft typischerweise zwischen dem 8.-12. Lebensjahr statt, bei afrikanischer Herkunft auch früher (1.-8. Lebensjahr).

Der *LCT*-13910T>C Genotyp läßt keine Aussage über das Vorliegen einer Kuhmilch-Allergie zu.

Methylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) ^{a)} - Hyperhomocysteinämie

Es wird eine 677C>T Mutation der *MTHFR* nachgewiesen, die einen A222V Austausch bewirkt und zu Hyperhomocysteinämie und Interaktion mit anderen prothrombotischen Risikofaktoren führen kann.

Prothrombin (Faktor II) ^{a)} - Thrombophilie

Es wird die 20210G>A Mutation im Prothrombin-Gen nachgewiesen. Bei heterozygoter Mutation besteht ein 3-7 faches relatives Risiko für das Auftreten einer Thrombose.

Thiopurin-S-Methyltransferase (TPMT) - Azathioprin (Imurek®)/Thiopurin Toxizität

Es werden die häufigsten *TPMT* Defektmutationen (*TPMT**3A, *TPMT**3C, *TPMT**2, *TPMT**3B) nachgewiesen. Diese sind über unterschiedliche molekulare und biochemische Mechanismen mit einem phänotypischen Verlust der katalytischen Aktivität der *TPMT* verbunden. Bei homozygoten Merkmalsträgern führt eine Thiopurintherapie (z.B. Azathioprin) bei gebräuchlicher Dosierung zur Panzytopenie. Im Vergleich zum Wildtyp haben heterozygote Merkmalsträger ein etwas höheres Risiko, welches durch die gleichzeitige Einnahme *TPMT* hemmender Pharmaka noch verstärkt wird. Die *TPMT**3 und *TPMT**2 Mutationen kodieren für 80-95% der phänotypischen Varianten. Bei Vorliegen einer heterozygoten Mutation *TPMT**3A sollte bei entsprechender Indikationsstellung ein *TPMT**3B/*TPMT**3C Genotyp durch Phänotypisierung ausgeschlossen werden.

UDP-Glucuronosyltransferase1 (UGT1A1) - Gilbert-Meulengracht Syndrom

Es wird der TATA-Box Polymorphismus des *UGT1A1* Promotors genotypisiert. Bei Kaukasiern sind fast ausschließlich 6 und 7 TA Wiederholungen anzutreffen. Es besteht eine inverse Korrelation zwischen Anzahl der TA Wiederholungen und der Promotor Aktivität, d.h. mit steigender TA Anzahl steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Manifestation des Gilbert-Meulengracht Syndroms.

Bei Medikamenten, die durch Glukuronidierung ausgeschieden werden, besteht mit zunehmender Anzahl an TA Wiederholungen ein gesteigertes Toxizitätsrisiko. Dieses konnte für das Chemotherapeutikum Irinotecan gezeigt werden.




Vitamin K Epoxidreduktase-Komplex Untereinheit 1 (VKORC1) ^{a)} - Marcumar® Dosisbedarf

Es wird der für die Phenprocoumon-Wirkung verantwortliche *VKORC1*-Haplotyp genotypisiert (1173C>T bzw. c.173+1000C>T). Es resultiert verminderte Expression der *VKORC1*, was zu einem reduzierten Phenprocoumon (z.B. Marcumar® oder anderer Vitamin-K Antagonist) Dosisbedarf führt. Dieser Haplotyp wird aufgrund von Kopplungsungleichgewicht in der Literatur unterschiedlich beschrieben (-1639 G>A bzw. 6484C>T bzw. 1173C>T bzw. c.173+1000C>T bzw. *VKORC1**2 bzw. H1,H2 oder A Haplotyp).

Eine Genotypisierung kann für die Dosisfindung in der Aufsättigungsphase von Nutzen sein. Wie in der Fachinformation für Phenprocoumon vorgeschrieben, erfolgt die weitere Dosisanpassung stets nach dem INR-Wert. Für die Initialdosis und Dosisfindung sind auch Gerinnungsstatus, Komedikation, Ernährung, Begleiterkrankungen etc. zu berücksichtigen. Für die Dosierung von Warfarin (Coumadin®) ist im Gegensatz zu Phenprocoumon zusätzlich der *CYP2C9* Genotyp zu berücksichtigen.

^{a)} Die **Ergebnisse** werden wie folgt dokumentiert: Wildtyp: -/-; Homozygote Mutation: +/+; Heterozygote Mutation: +/-




S-Monovette® Lithium-Heparin-Gel

	4,7 ml	Art. Nr. 03.1631	Klinik Art. Nr.: 4041109
	2,7 ml	Art. Nr. 04.1928	Klinik Art. Nr.: 4052967
	1,1 ml	Art. Nr. 06.1669.001	Klinik Art. Nr.: 4013643

Lithium-Heparin-Gel

Klinische Chemie

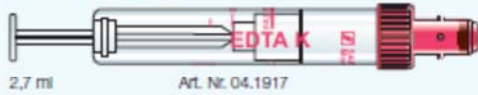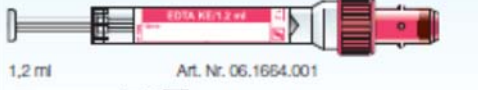


S-Monovette® EDTA

	2,7 ml	Art. Nr. 04.1917	Klinik Art. Nr.: 4045942
	1,2 ml	Art. Nr. 06.1664.001	Klinik Art. Nr.: 4004053
	1,3 ml	Art. Nr. 41.1395.005	Klinik Art. Nr.: 4005073

EDTA

Hämatologie






S-Monovette® Citrat

	4,3 ml	Art. Nr. 04.1922	Klinik Art. Nr.: 4045945
	1,4 ml	Art. Nr. 06.1668.001	Klinik Art. Nr.: 4003521
	1,3 ml	Art. Nr. 41.1350.005	Klinik Art. Nr.: 4006256

Citrat 1:10

Gerinnung

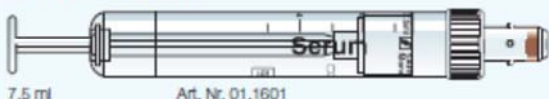S-Monovette® Serum

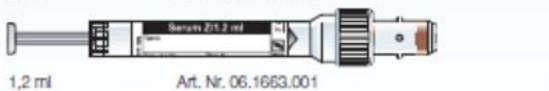	7,5 ml	Art. Nr. 01.1601	Klinik Art. Nr.: 4004018
	5,5 ml	Art. Nr. 03.1397	Klinik Art. Nr.: 4002606
	2,7 ml	Art. Nr. 04.1943.001	Klinik Art. Nr.: 4045941
	1,2 ml	Art. Nr. 06.1663.001	Klinik Art. Nr.: 4013630
	1,3 ml	Art. Nr. 41.1392.005	Klinik Art. Nr.: 4014389

Serum

Spezialanalyse
z.B. Elektrophorese/
TM

S-Monovette® Flourid



2,7 ml

Art. Nr. 04.1918

Klinik Art. Nr.: 4045943



1,2 ml


Art. Nr. 05.1665.001

Klinik Art. Nr.: 4013644

Flourid

Spezialanalyse
Lactat

Urin-Monovette®

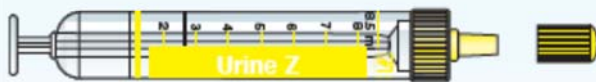


8,5 ml

Art. Nr. 10.258

Klinik Art. Nr.: 4045946

Urin

Urinanalyse

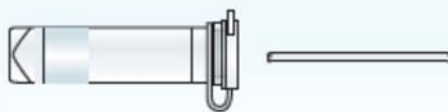

500/20 µl

Art. Nr. 41.1438.901

Klinik Art. Nr.: 4034738

**Glucose
Hämolyset**

Salivette®



1,0 ml

Art. Nr. 51.1534

Klinik Art. Nr.: 4034773

**Speichel
Speichelanalyse**

S-Monovette® GlucoEXACT



3,1 ml

Art. Nr. 05.1074.001

Klinik Art. Nr.: 4045673

**Flourid/
Citrat**
Multiplication
factor 1,16

Gestationsdiabetes

Technische Änderungen vorbehalten

KP 558